

DOSIMETRIA ANUAL RELATIVA DE PDDS Y PERFILES DE DOSIS 2017

ACELERADOR ELEKTA SYNERGY PLATFORM SN:153870

Equipamiento utilizado: Fantoma Automático IBA BluePhantom2 SN:15800. Electrómetro IBA CCU SN:23261.

Dosis medida comparada con la dosis calculada en TPS Monaco:

Tamaño de grilla: 0.3 cm (fotones) - 0.1 cm (campos pequeños/electrones).


Incerteza estadística: 0.1% (fotones) - Nro de historias/cm²: 1M (electrones).

Se realiza análisis Gamma Index con parámetros: Dosis de acuerdo: 2.0 % - Distancia de acuerdo: 2.0 mm


Equipo	Fecha	Detector/SN	Partícula	E_MV/MeV	SSD_cm	TC_cm	Eje	Prof_mm	Gamma_pass	Tolerancia
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	5.0	Y	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	5.0	X	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	5.0	Y	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	5.0	X	200.0	99.3	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	5.0	Y	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	5.0	X	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	5.0	Y	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	5.0	X	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	Y	50.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	X	50.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	Y	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	X	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	Y	200.0	100.0	95.0

Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	10.0	X	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	Y	50.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	X	50.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	Y	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	X	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	Y	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	10.0	X	200.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	30.0	Y	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	6.0	100.0	30.0	X	100.0	100.0	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	30.0	Y	100.0	96.6	95.0
Platform	18/10/2017	CC13SN14317	Fotones	15.0	100.0	30.0	X	100.0	99.9	95.0


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

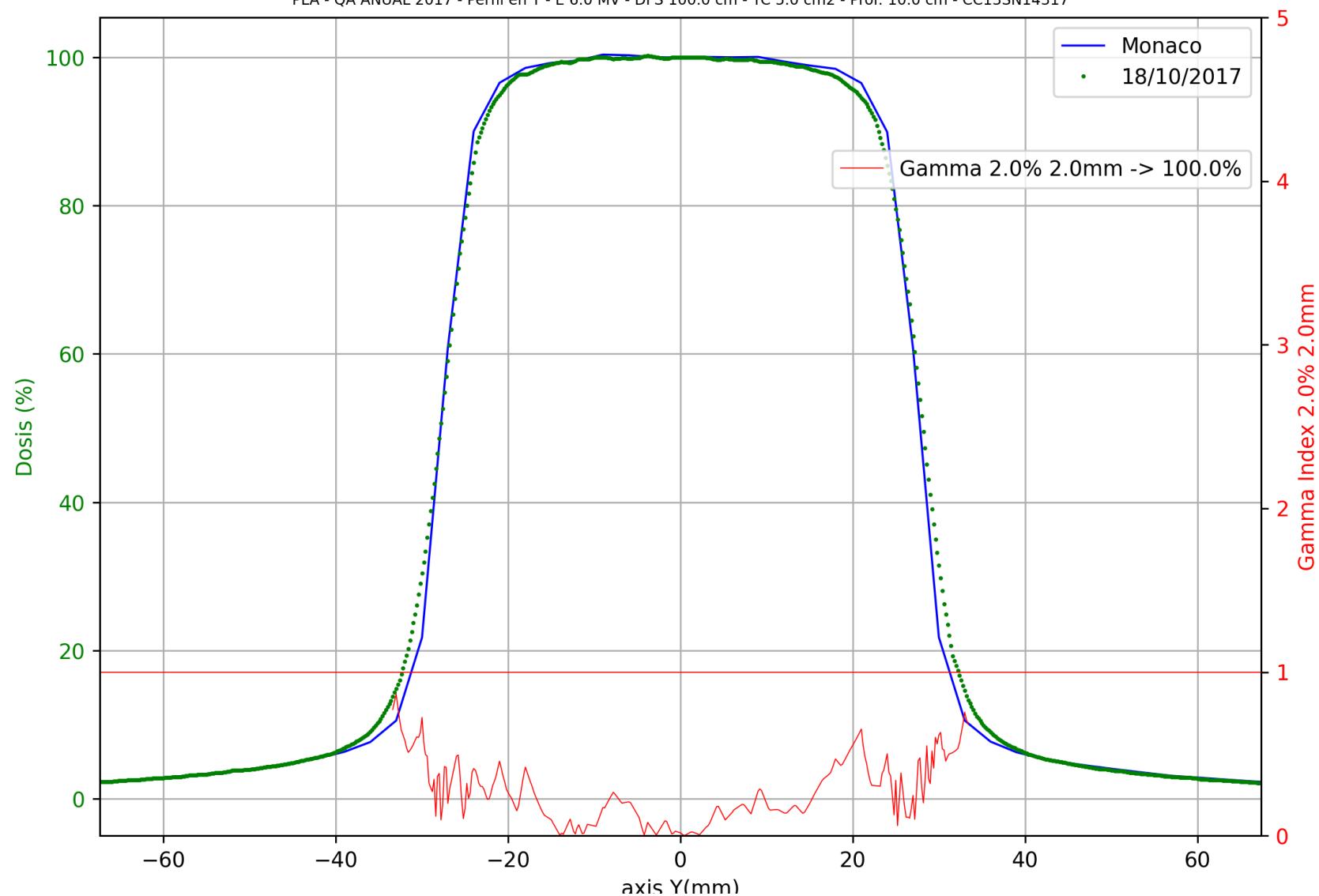


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

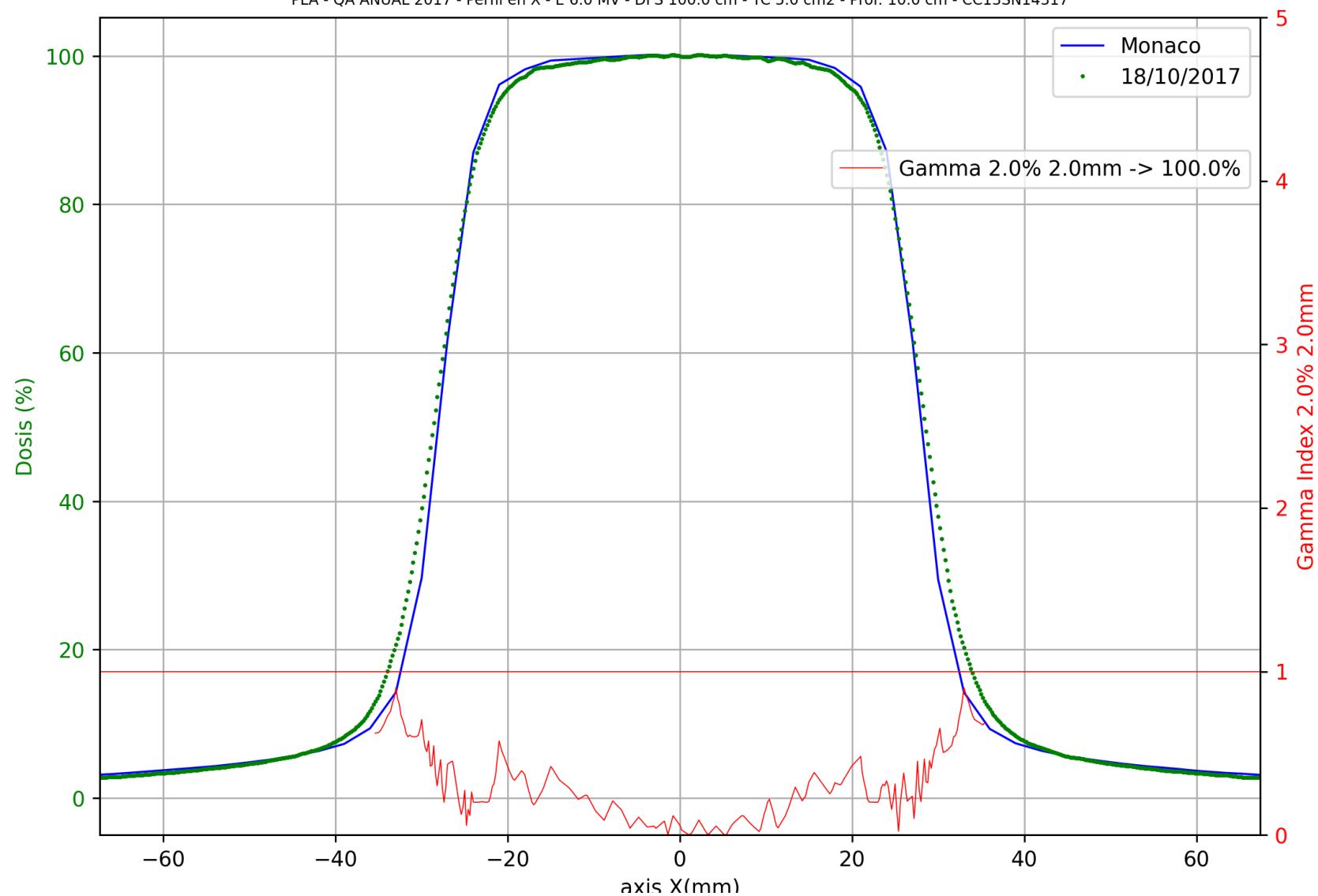


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

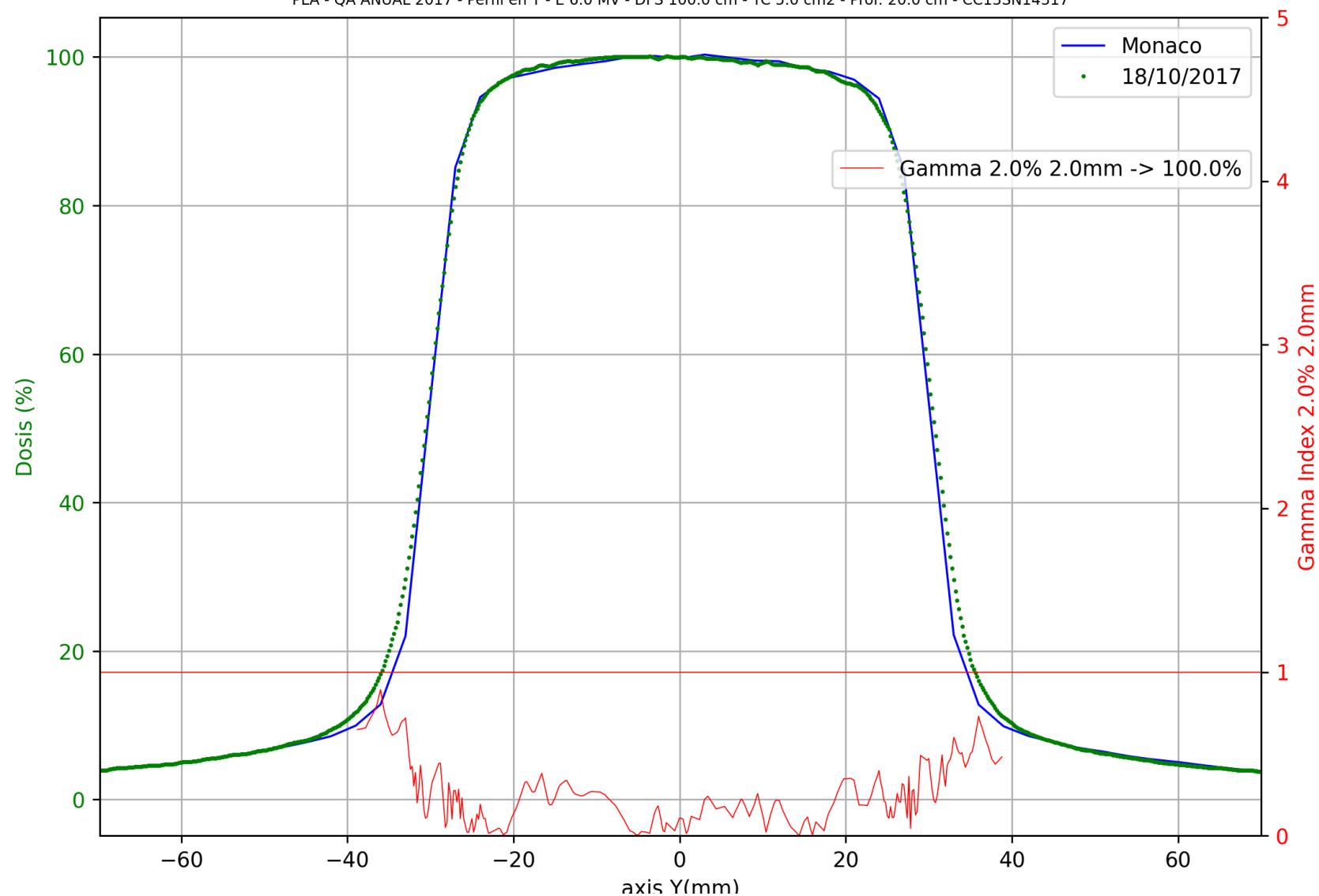


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

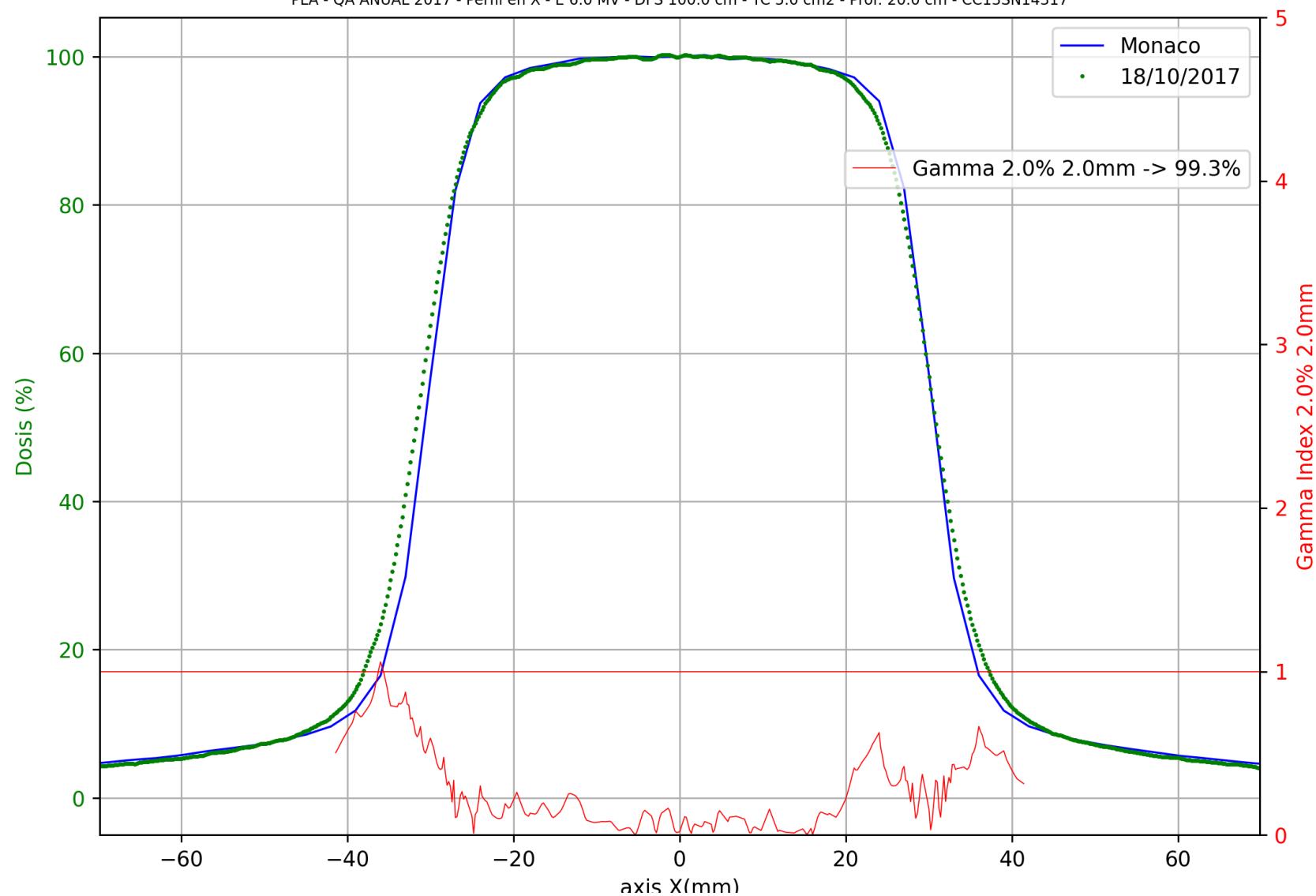


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

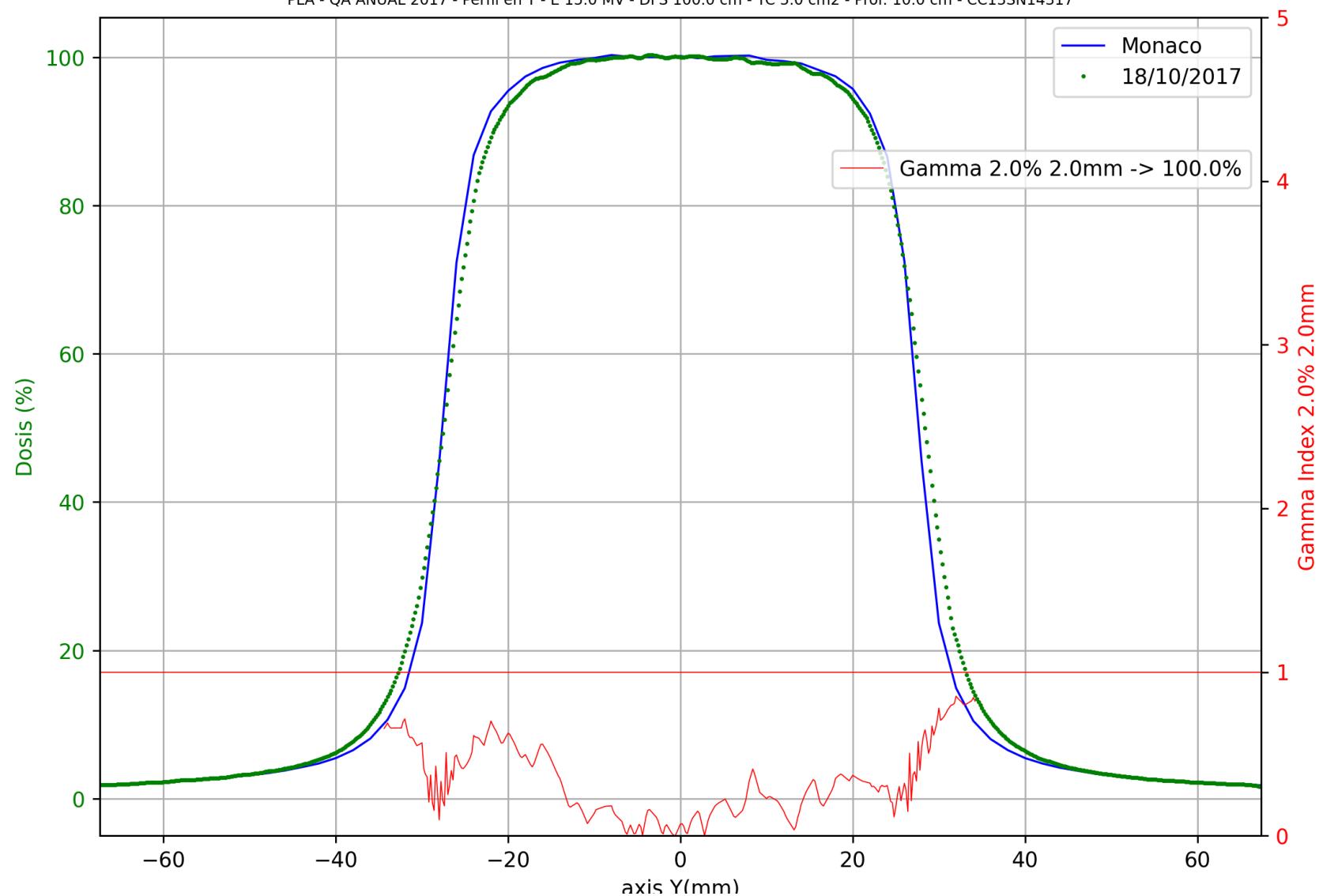


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

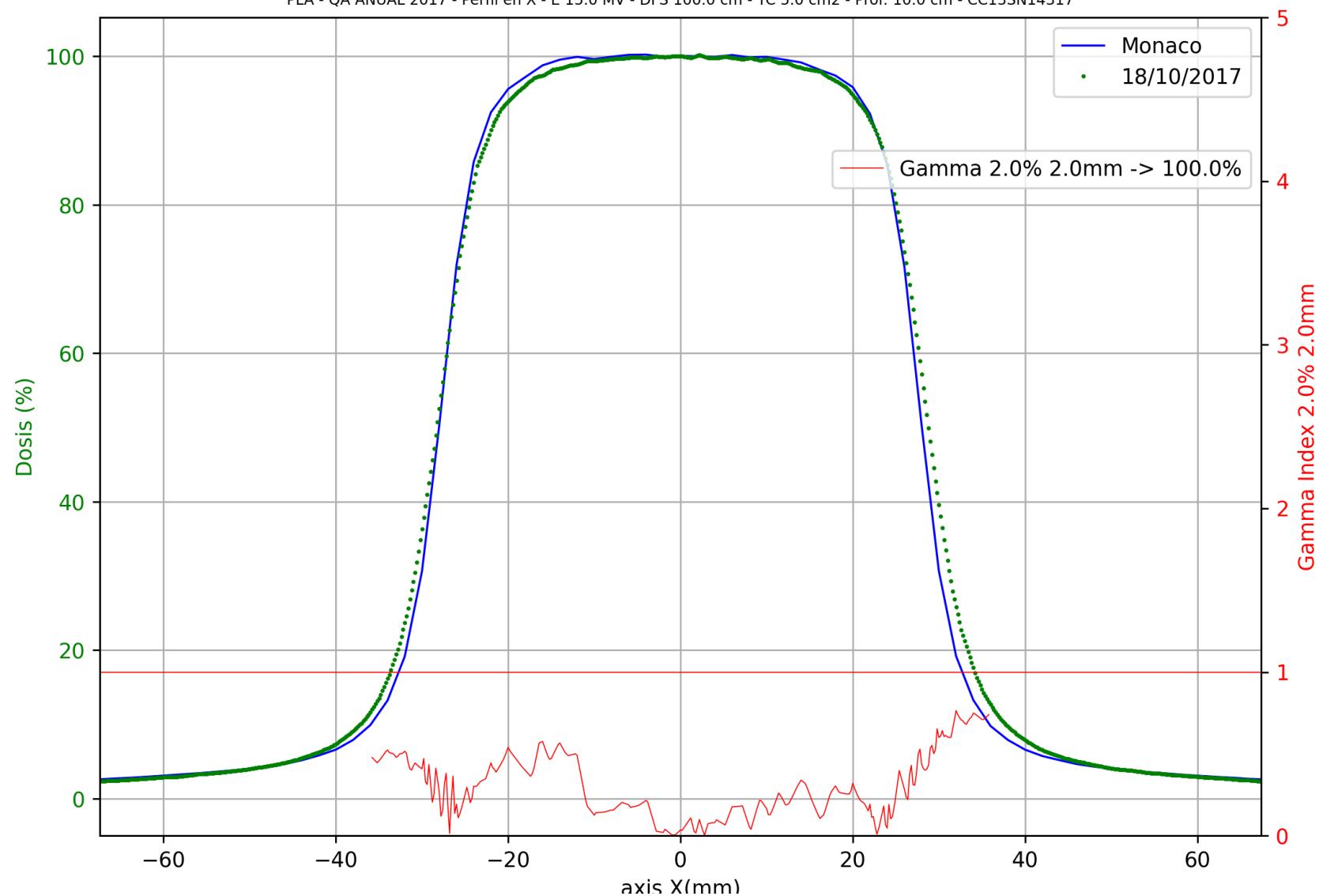


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

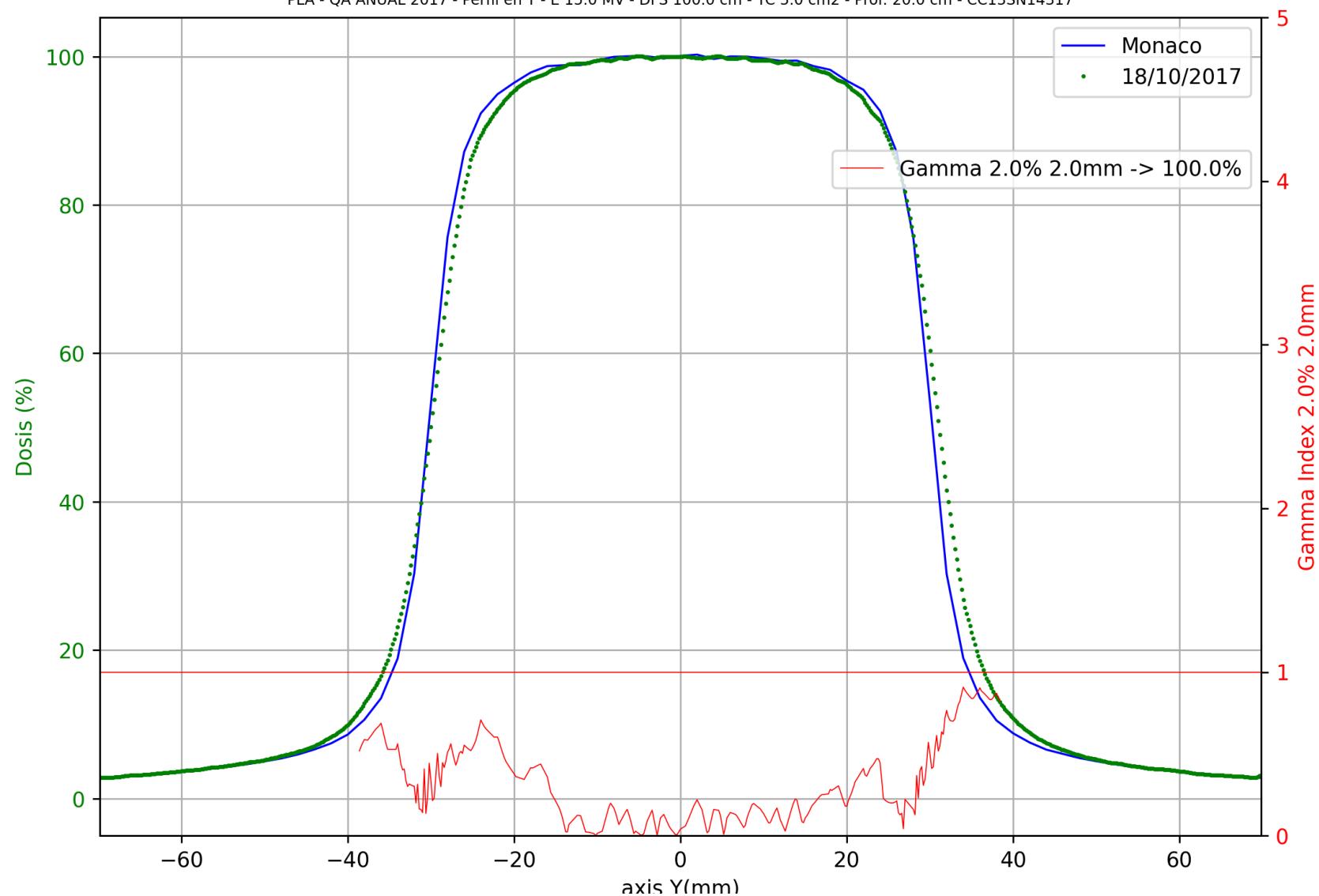


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 5.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

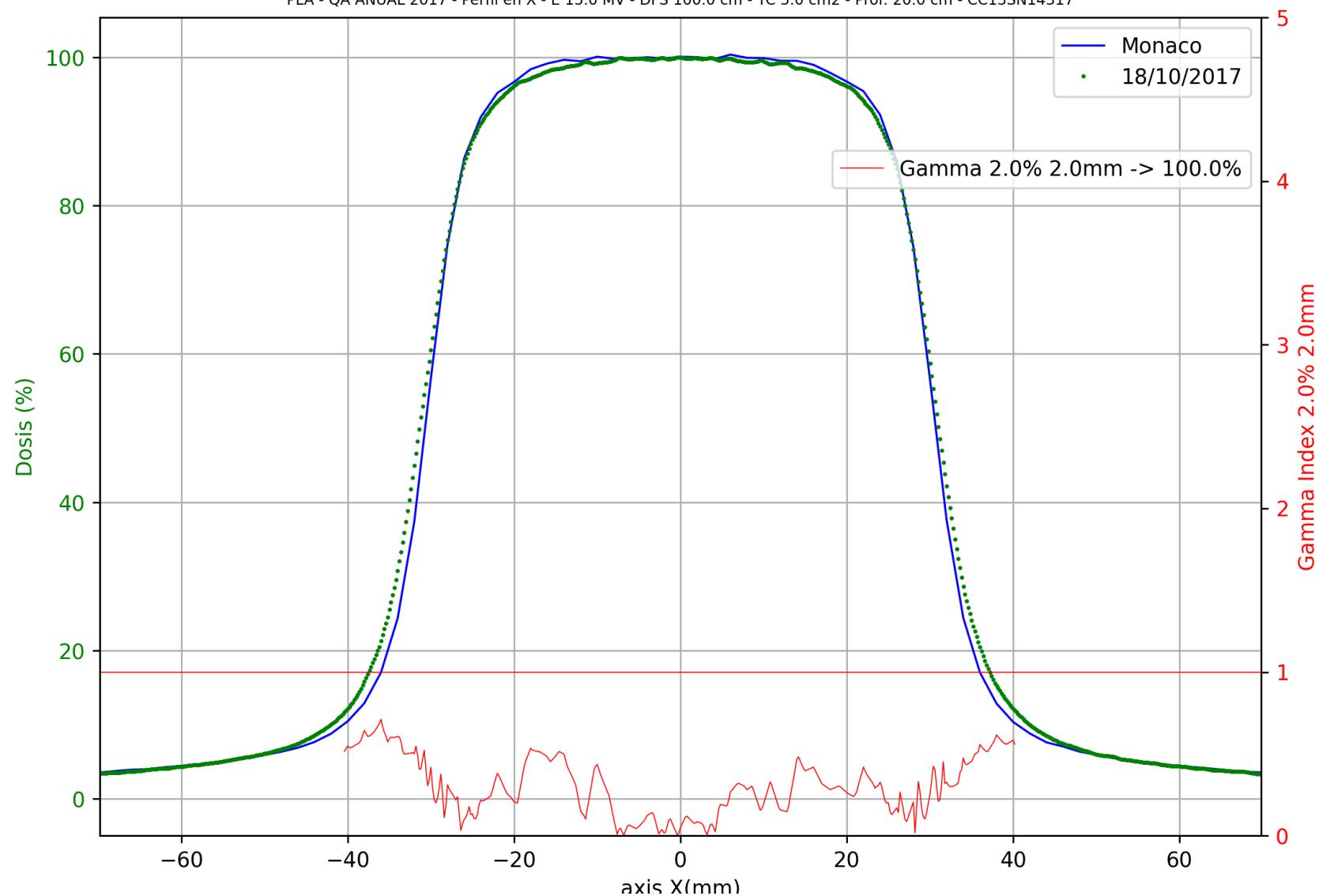


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 5.0 cm - CC13SN14317

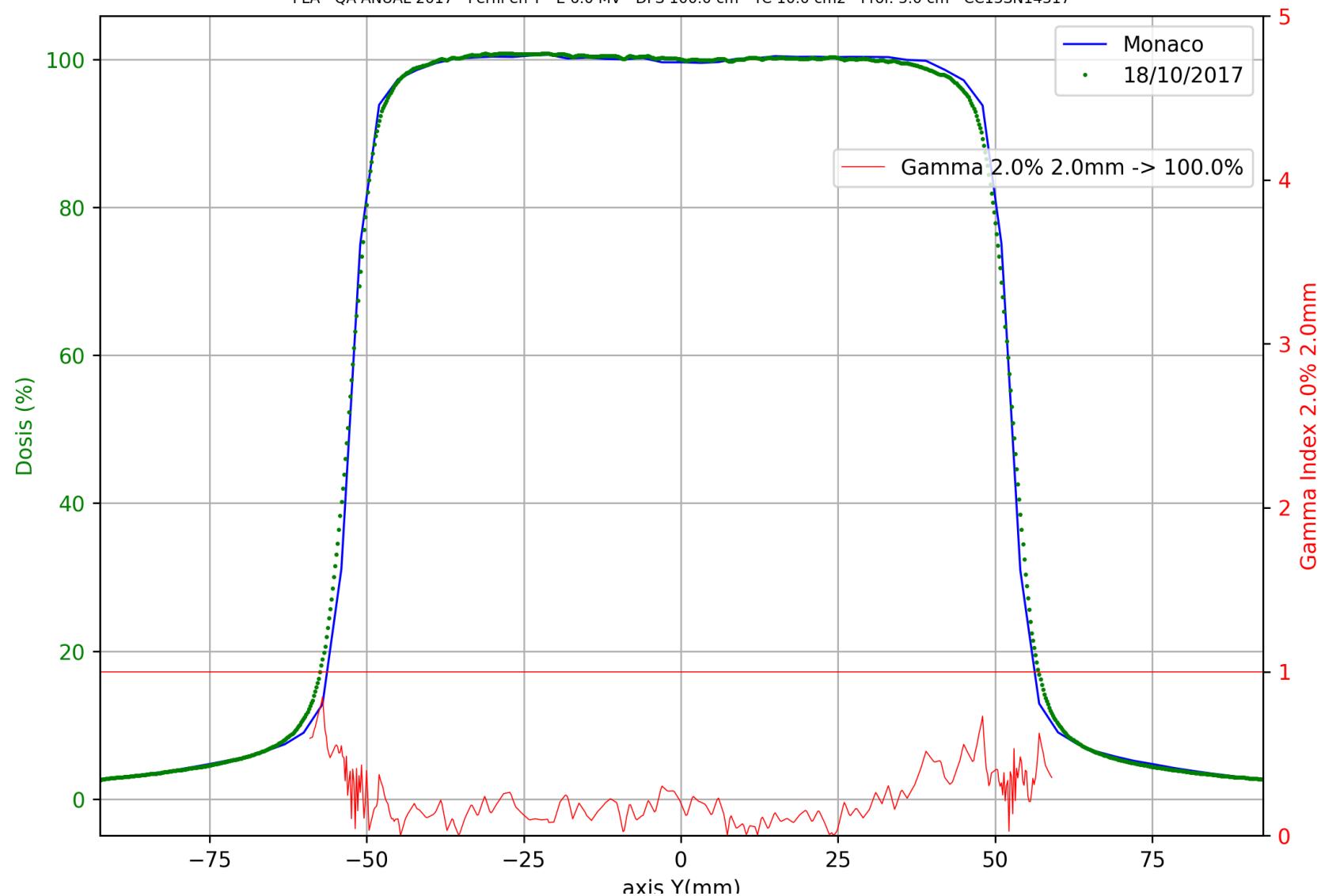


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 5.0 cm - CC13SN14317

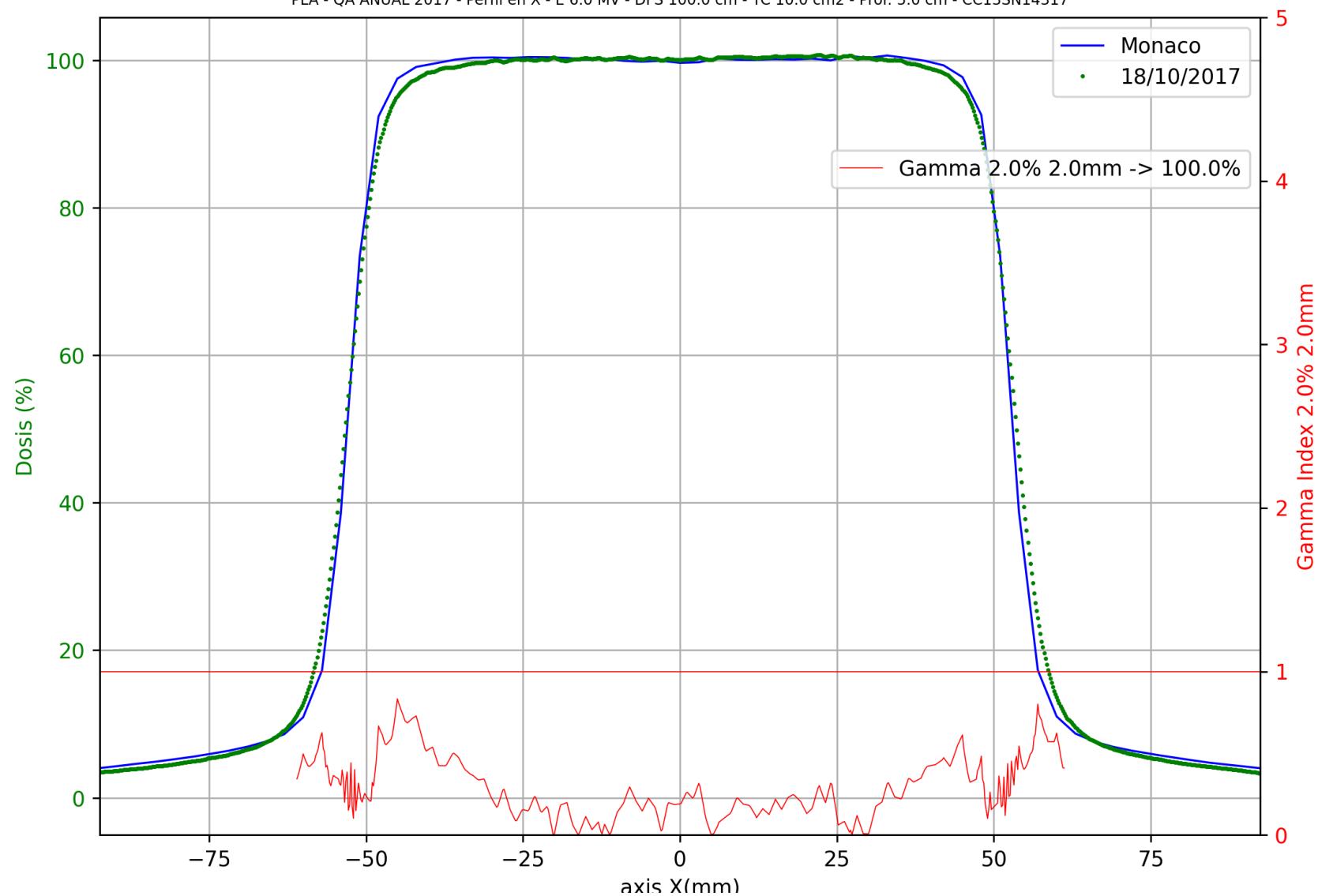


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

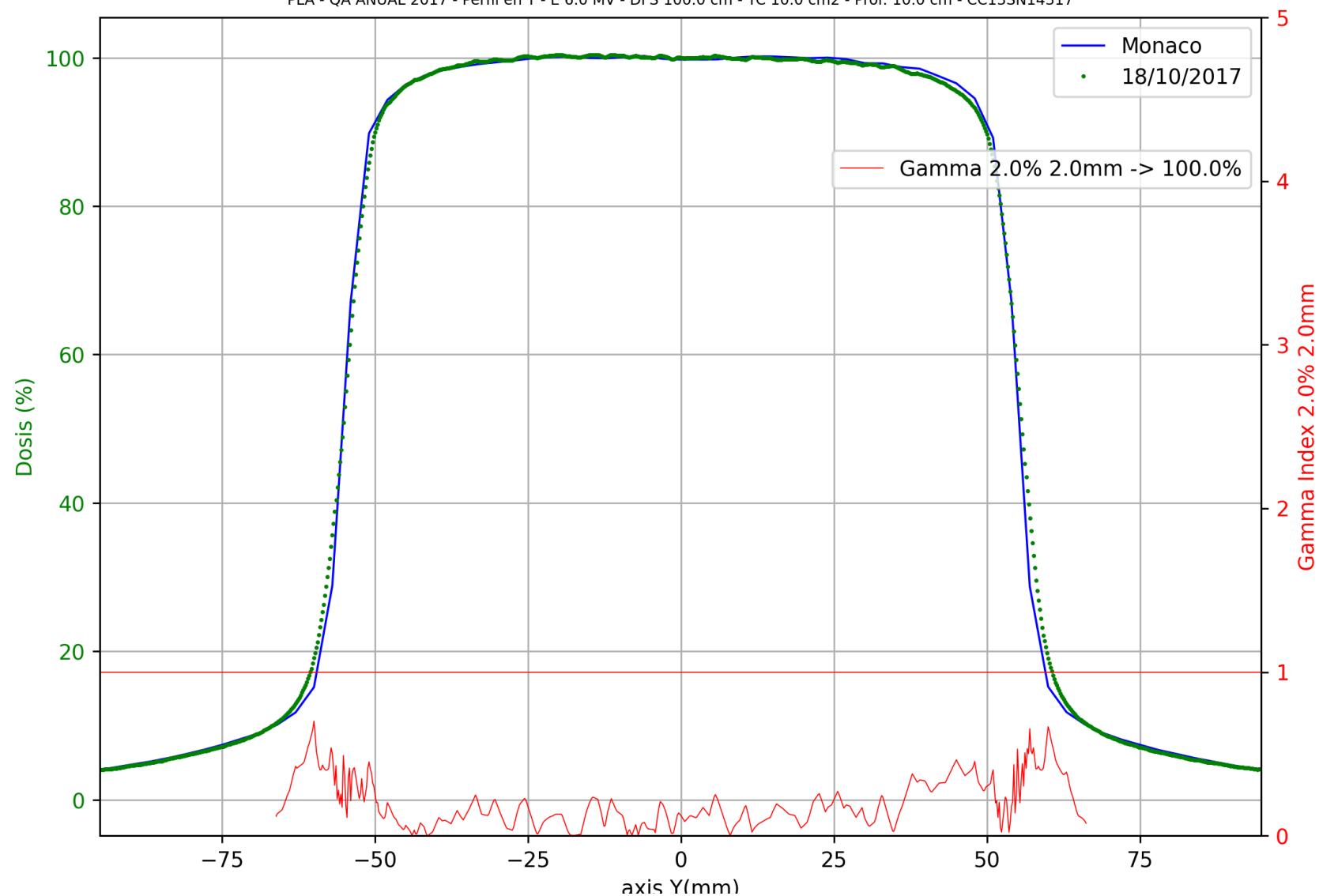


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

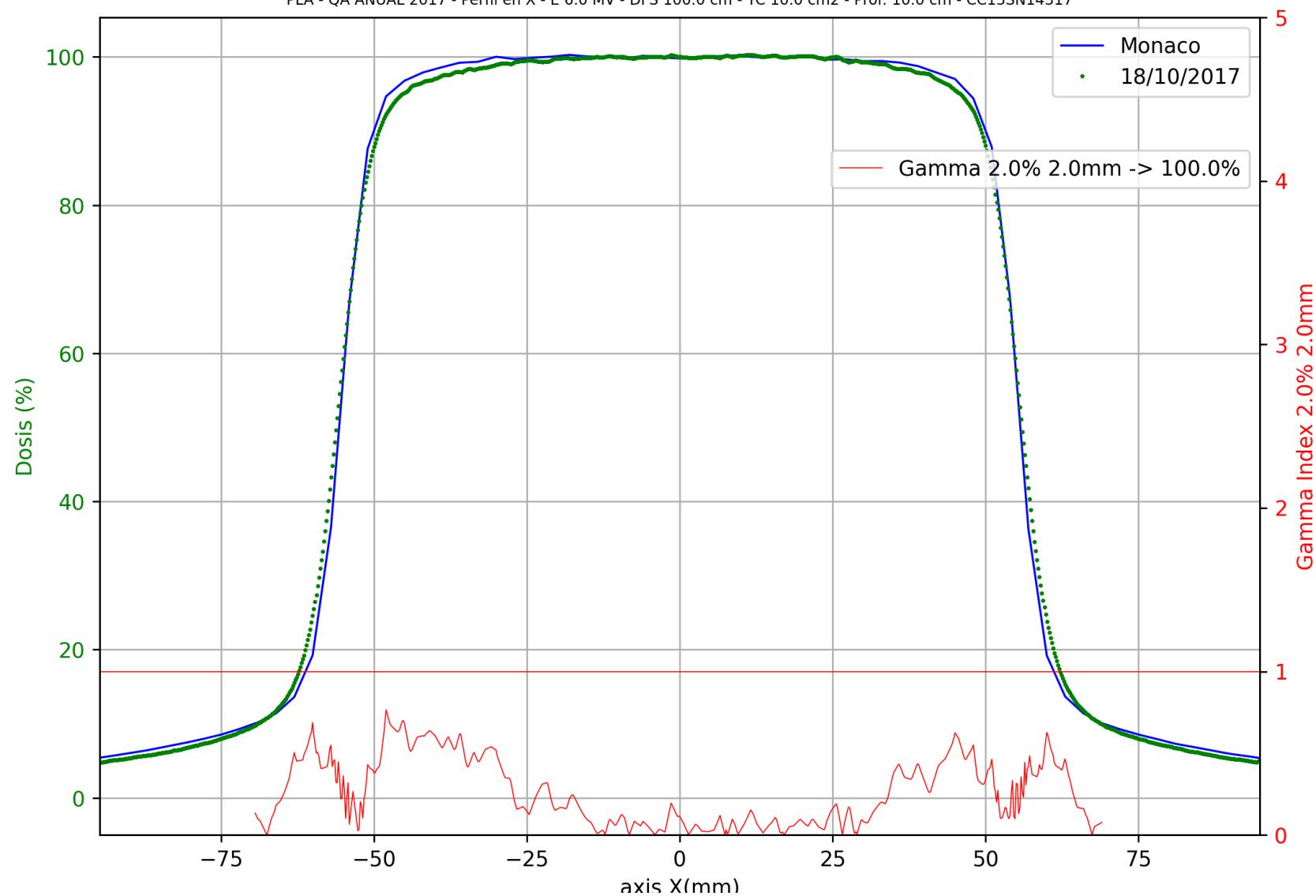


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

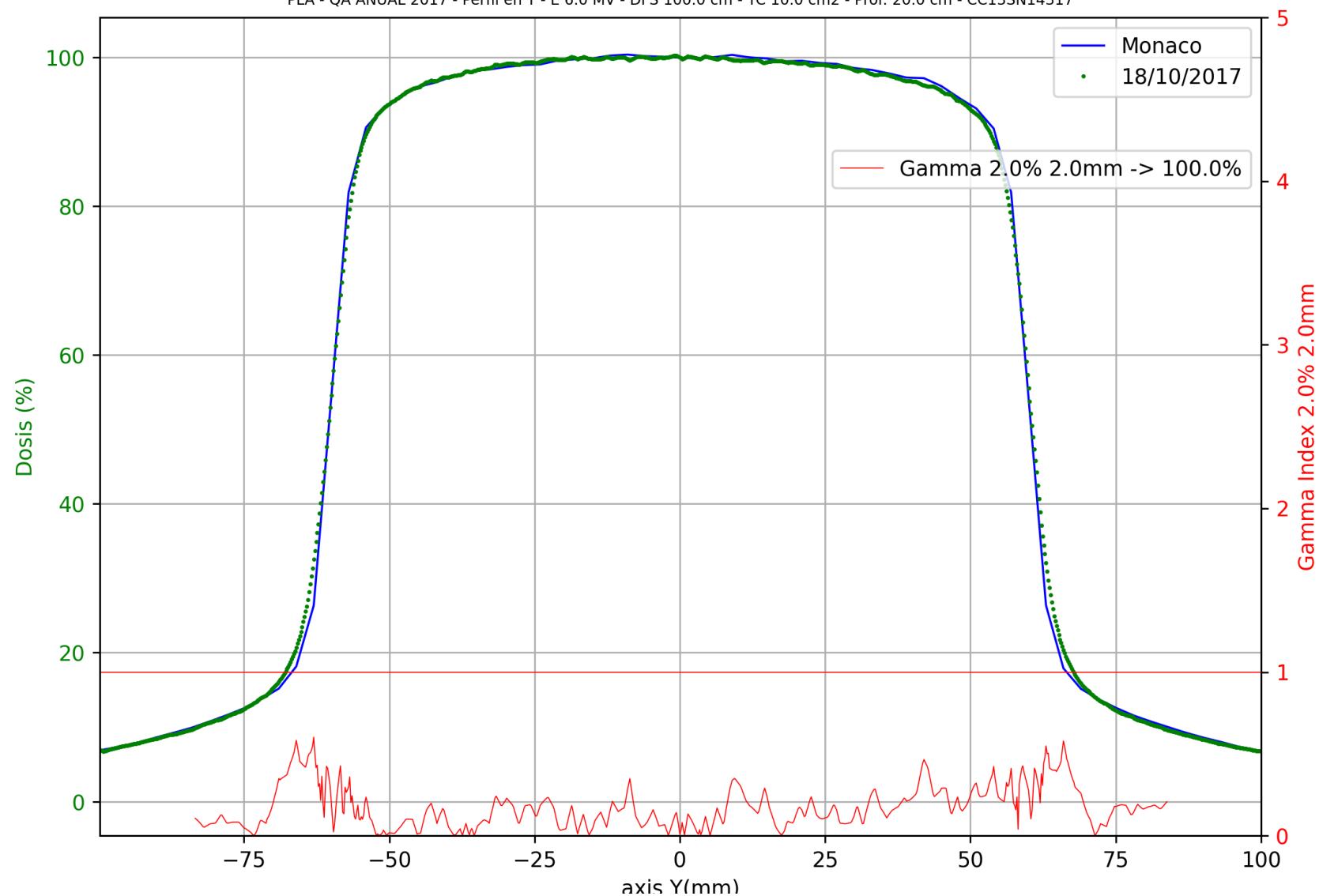


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

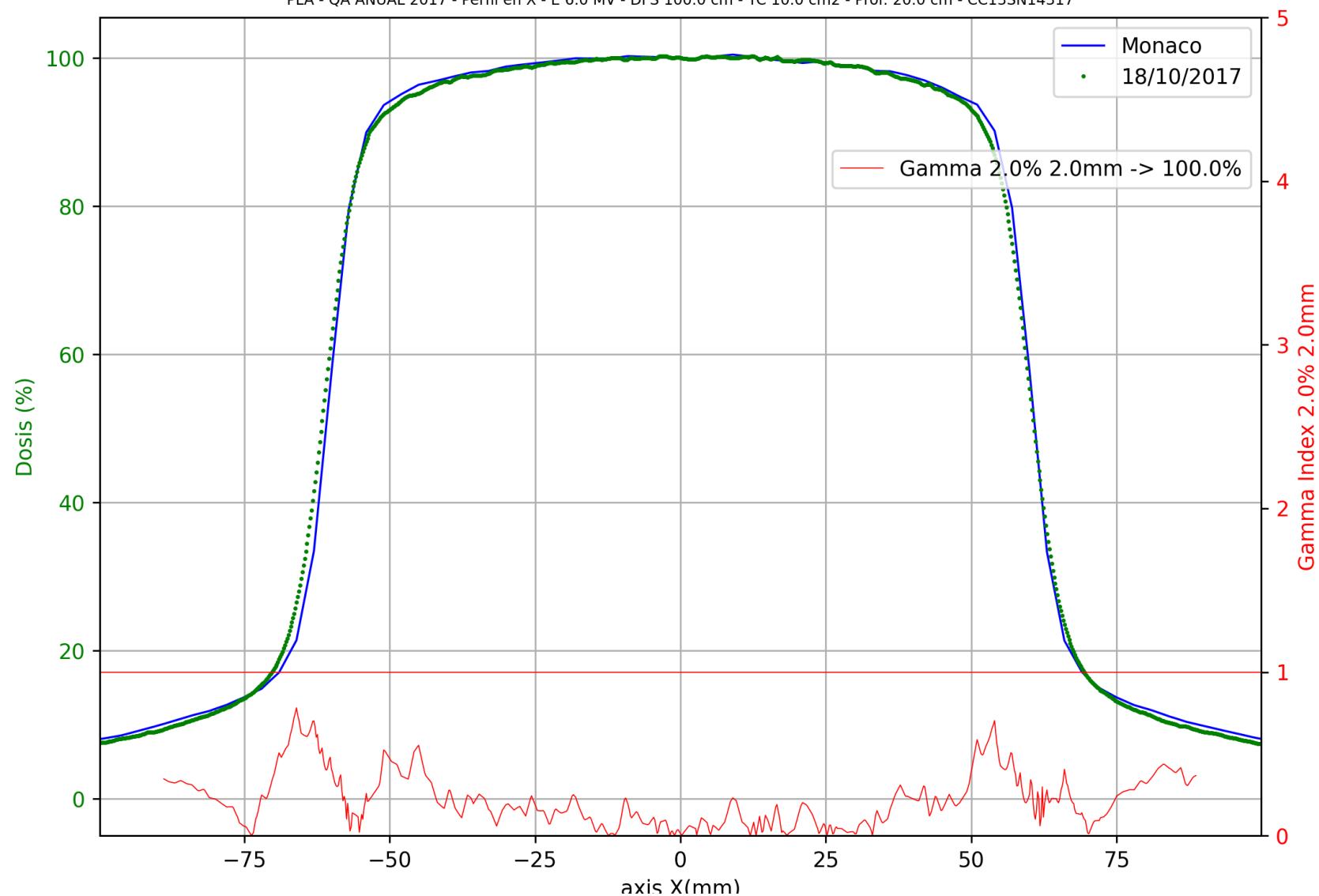


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 5.0 cm - CC13SN14317

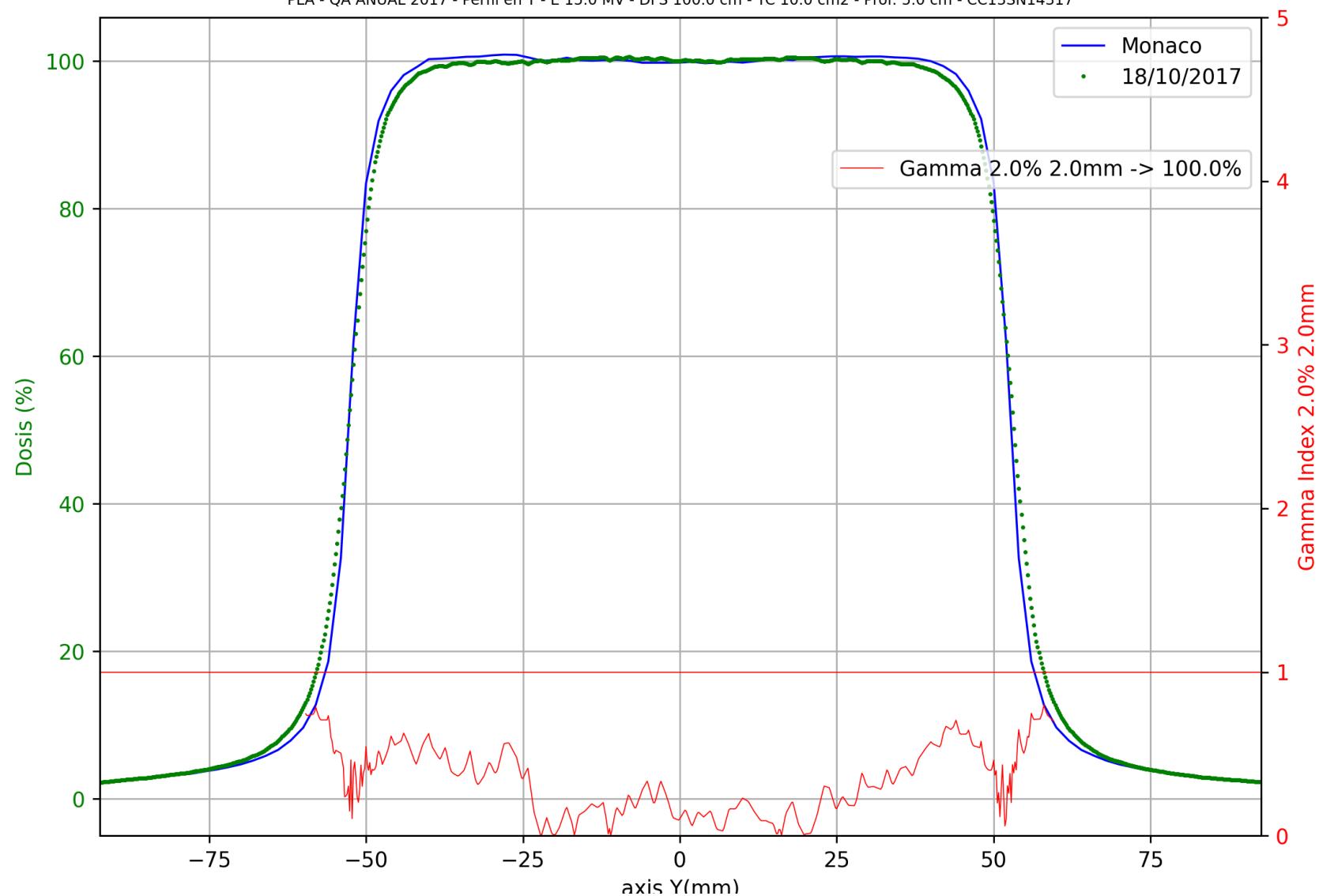


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 5.0 cm - CC13SN14317

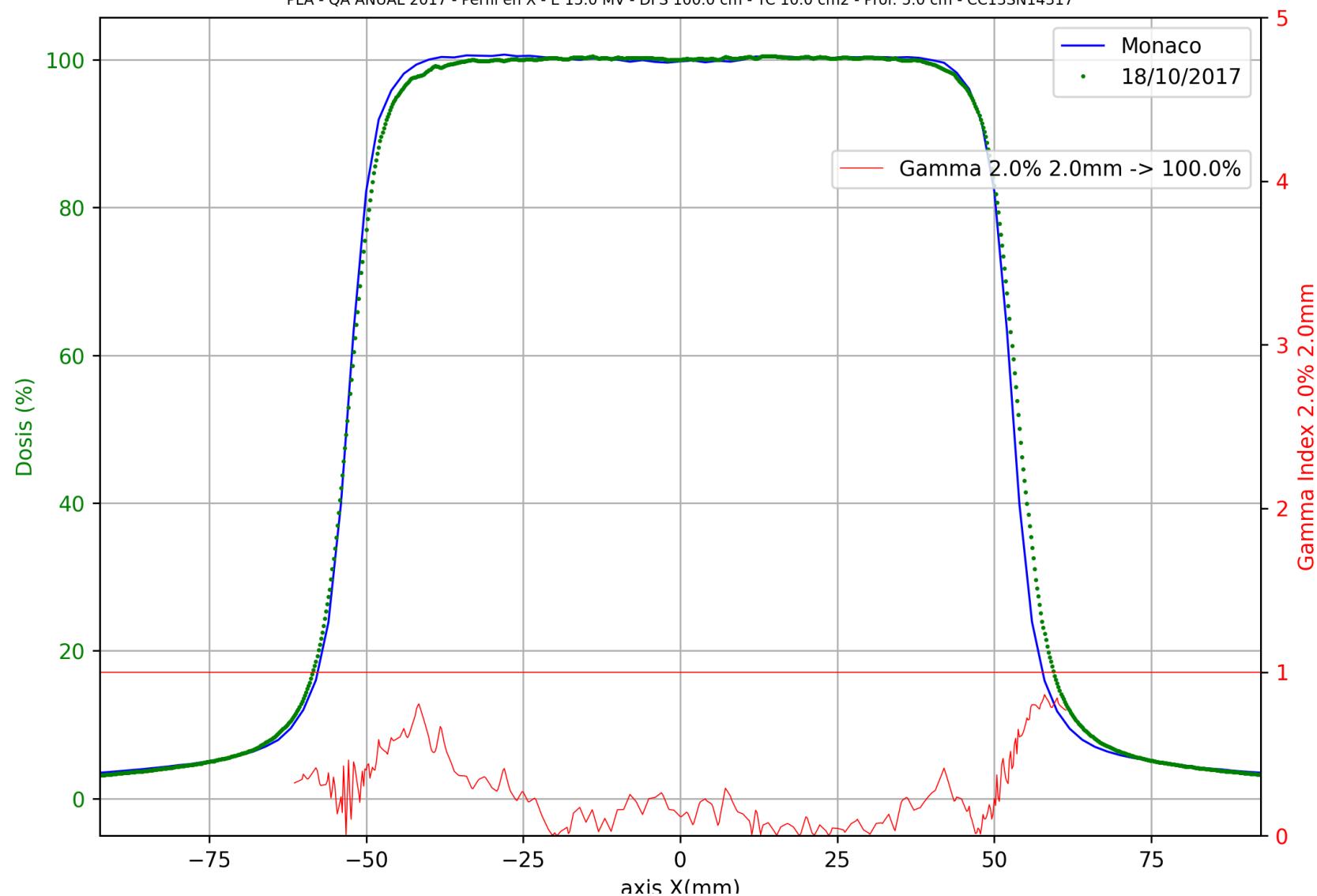


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

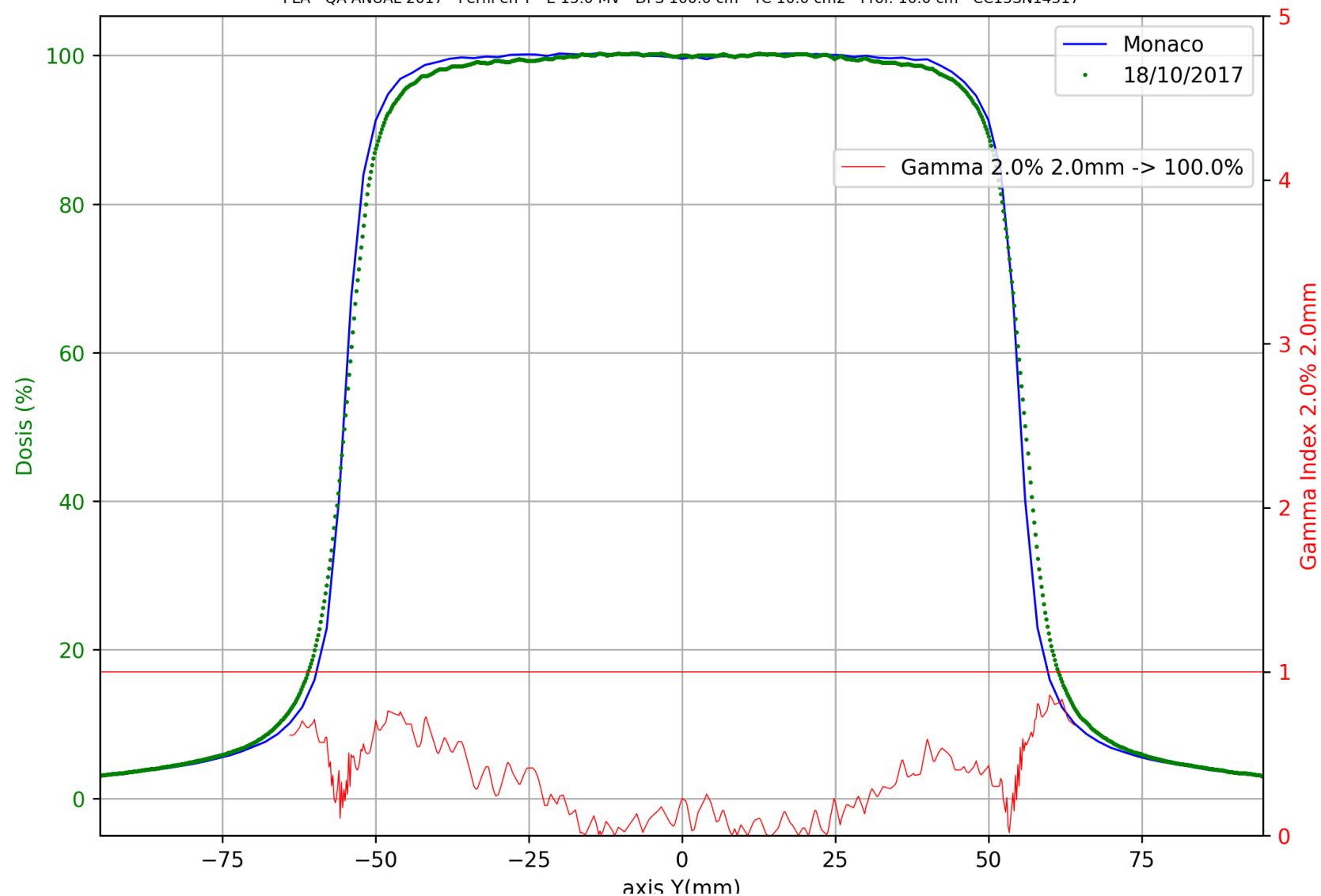


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

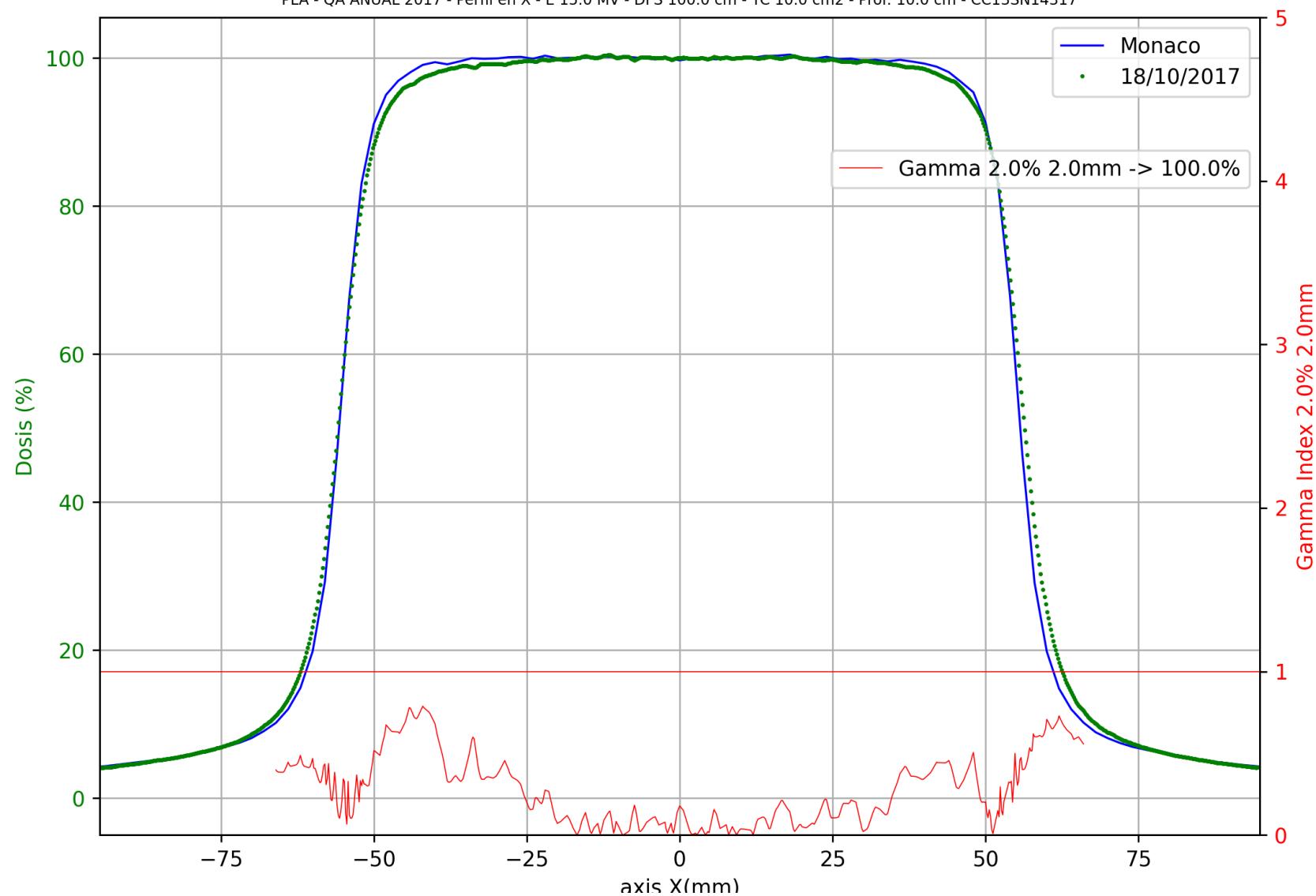


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

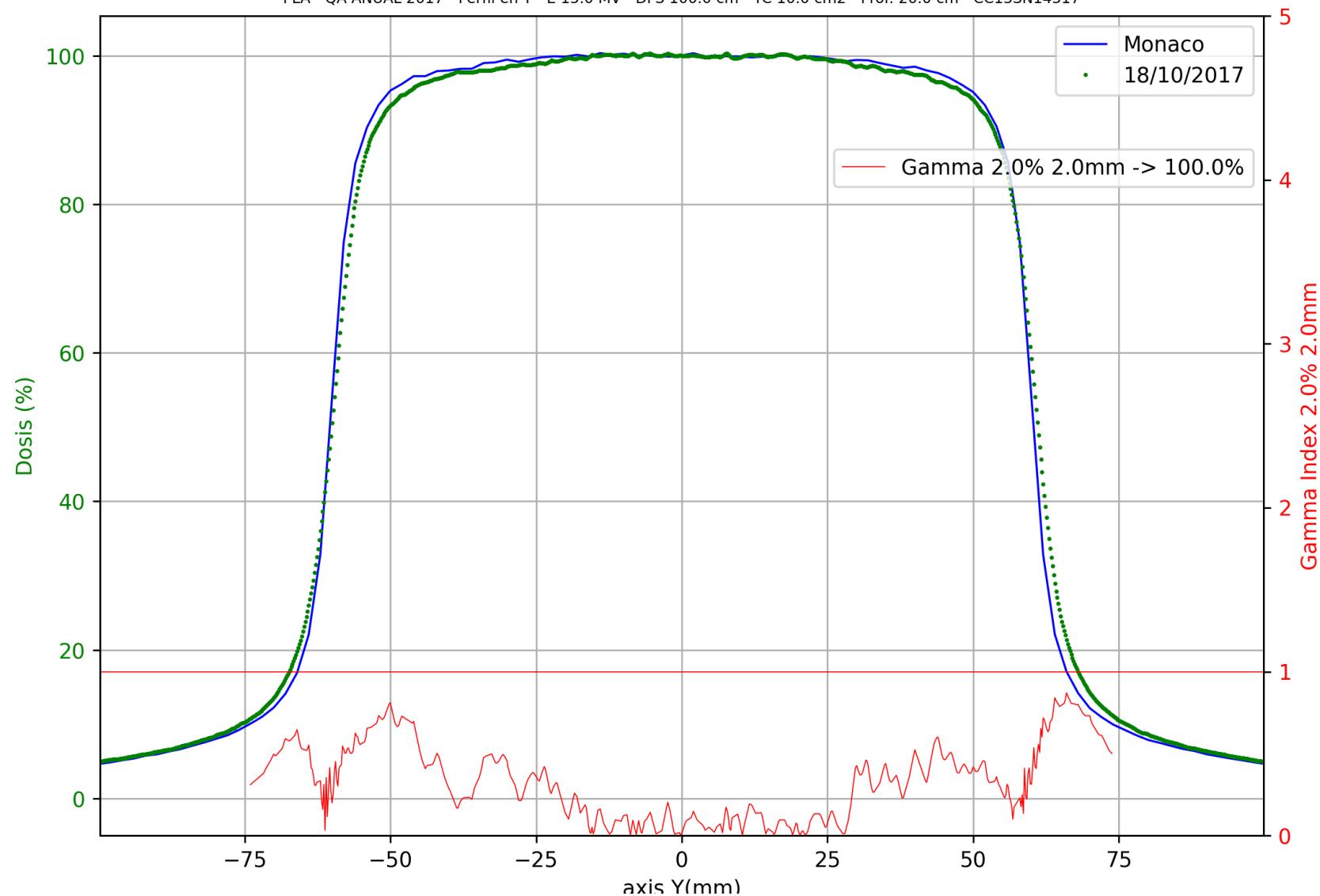


PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 10.0 cm² - Prof: 20.0 cm - CC13SN14317

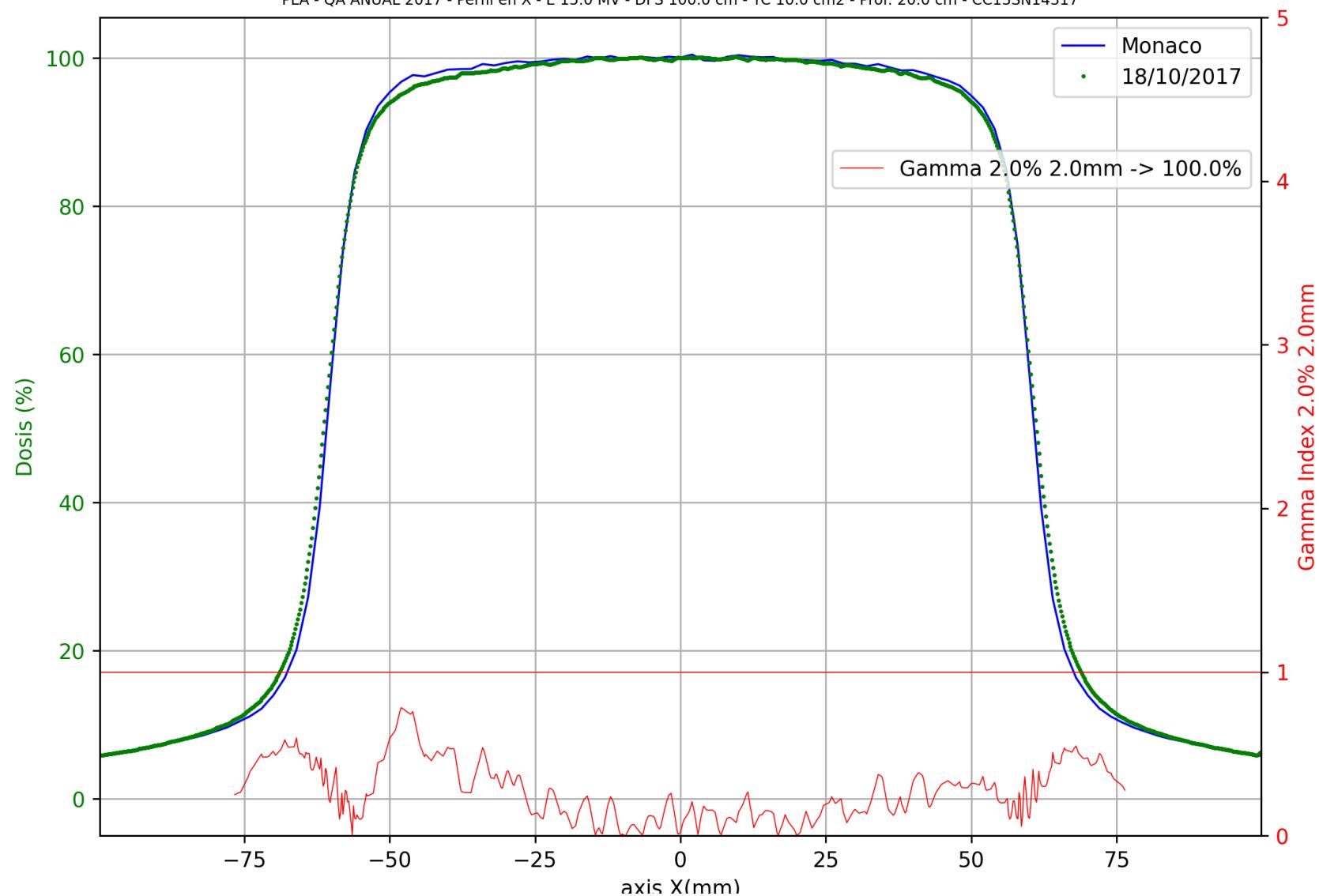

PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 30.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

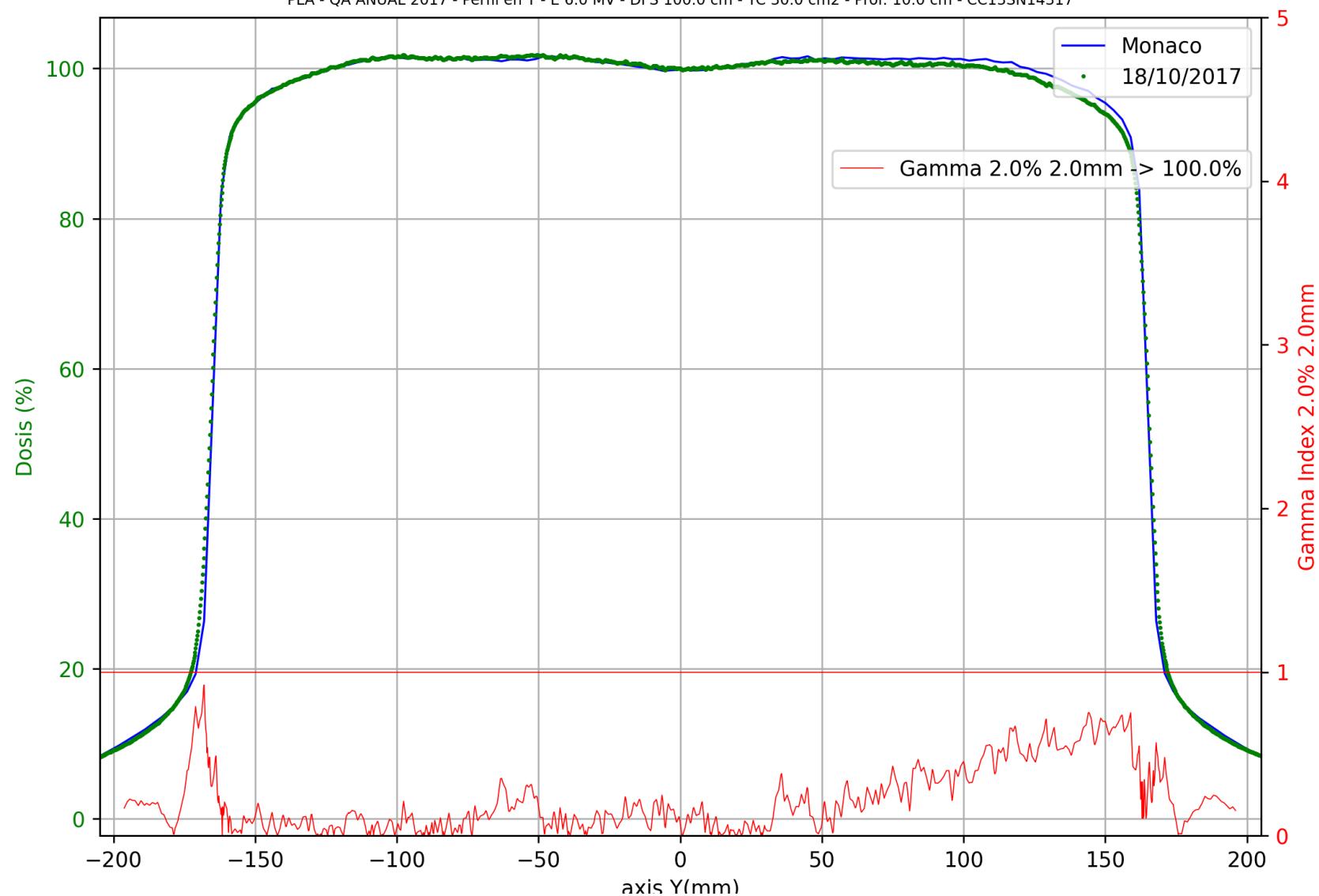

PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en X - E 6.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 30.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

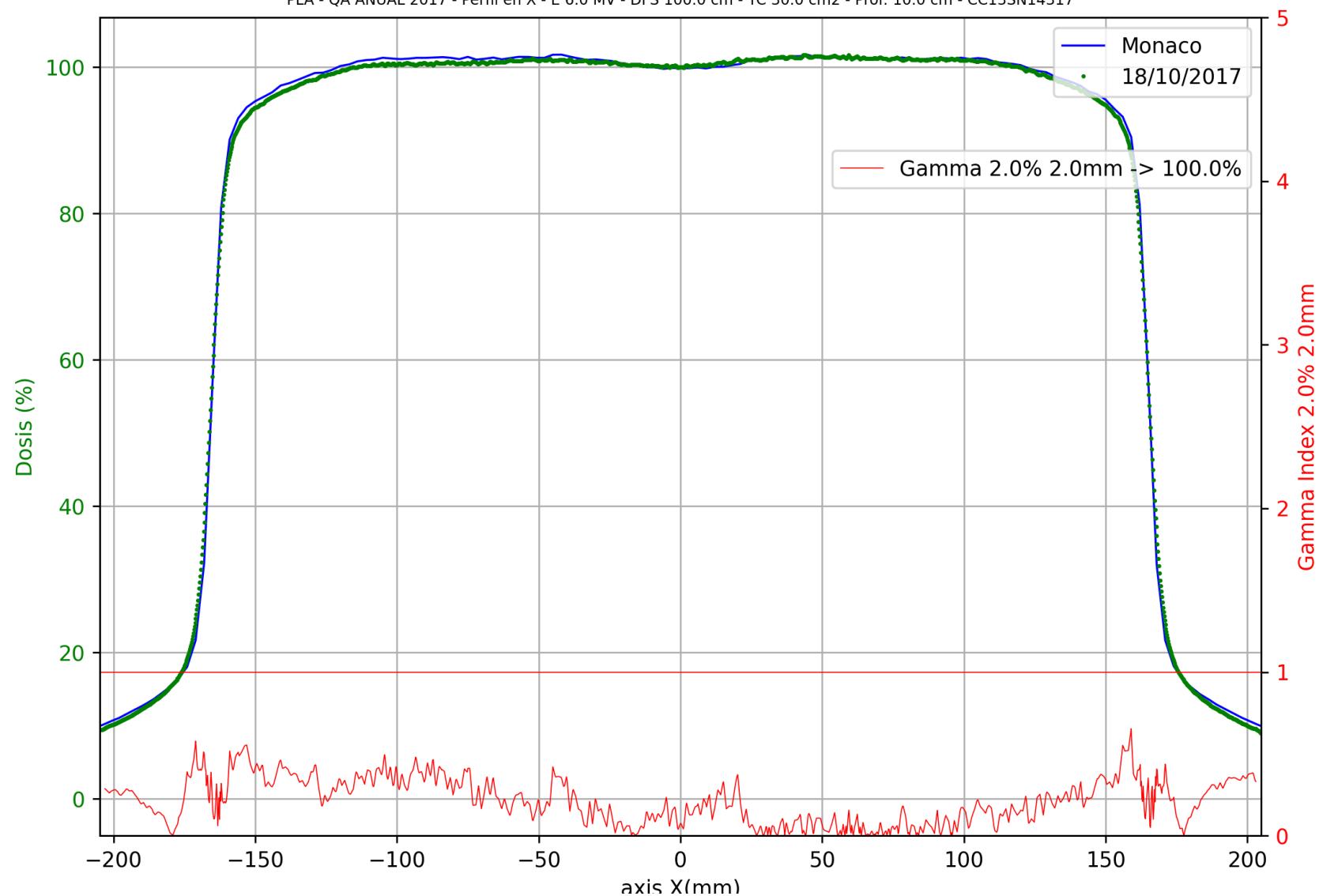

PLA - QA ANUAL 2017 - Perfil en Y - E 15.0 MV - DFS 100.0 cm - TC 30.0 cm² - Prof: 10.0 cm - CC13SN14317

