

# DOSIMETRIA ANUAL RELATIVA DE PDDS Y PERFILES DE DOSIS 2024

## ACELERADOR ELEKTA SYNERGY FULL SN:153868

Equipamiento utilizado: Fantoma Automático IBA BluePhantom2 SN:15800. Electrómetro IBA CCU SN:23261.

Dosis medida comparada con la dosis calculada en TPS Monaco:


Tamaño de grilla: 0.3 cm (fotones) - 0.1 cm (campos pequeños/electrones).

Incerteza estadística: 0.1% (fotones) - Nro de historias/cm<sup>2</sup>: 1M (electrones).


Se realiza análisis Gamma Index con parámetros: Dosis de acuerdo: 2.0 % - Distancia de acuerdo: 2.0 mm

Equipo	Fecha	Detector/SN	Partícula	E_MV/MeV	SSD_cm	TC_cm	Eje	Prof_mm	Gamma_%	Tolerancia
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	6.0	100.0	20.0	Z		92.4	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	9.0	100.0	20.0	Z		90.9	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	12.0	100.0	20.0	Z		75.8	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	15.0	100.0	20.0	Z		92.9	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	6.0	100.0	6.0	Z		92.4	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	9.0	100.0	6.0	Z		90.8	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	12.0	100.0	6.0	Z		84.8	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	15.0	100.0	6.0	Z		69.2	95.0


SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 6.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 20.0 cm2 - CC13SN14317

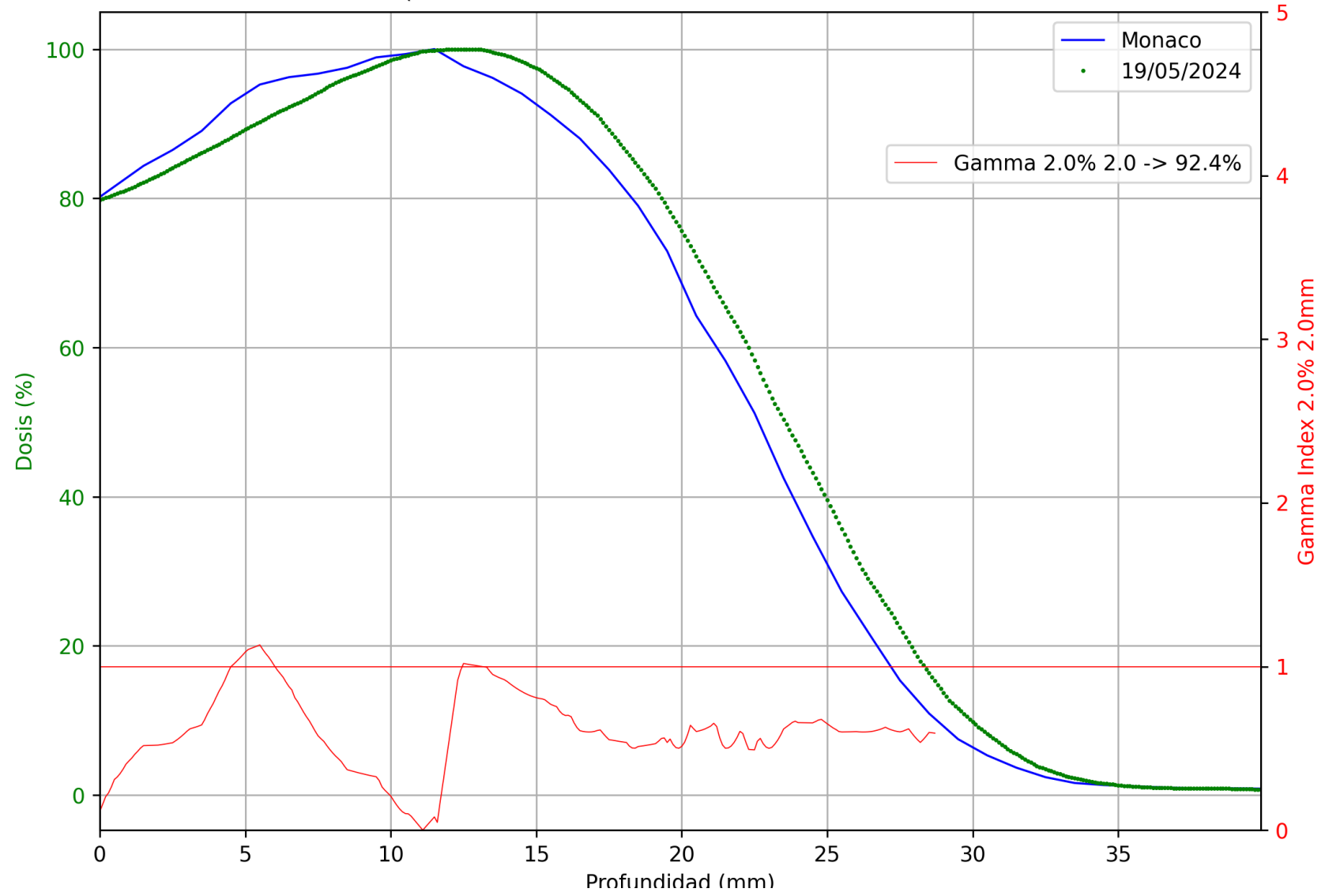


SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 9.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 20.0 cm2 - CC13SN14317

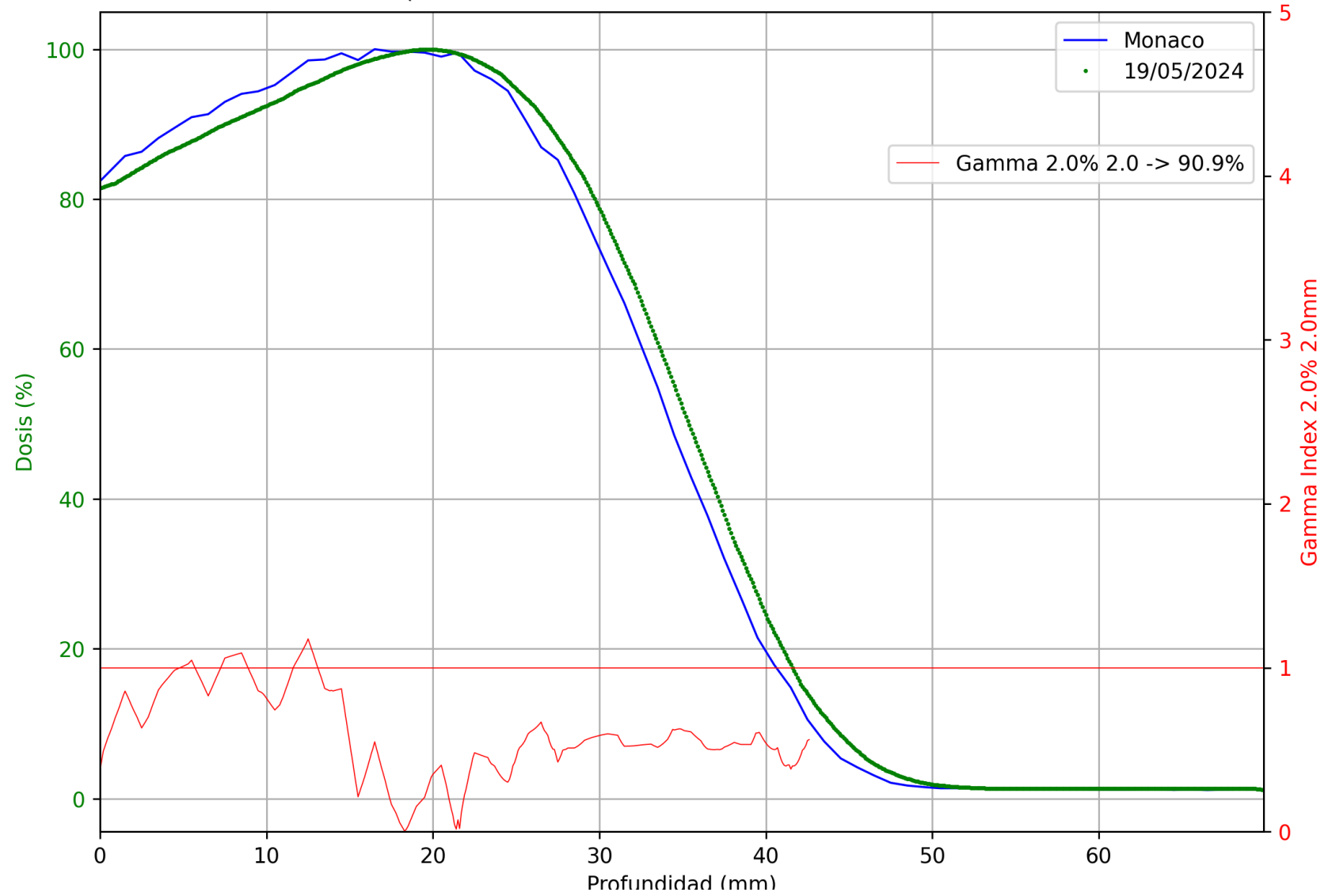


SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 12.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 20.0 cm2 - CC13SN14317

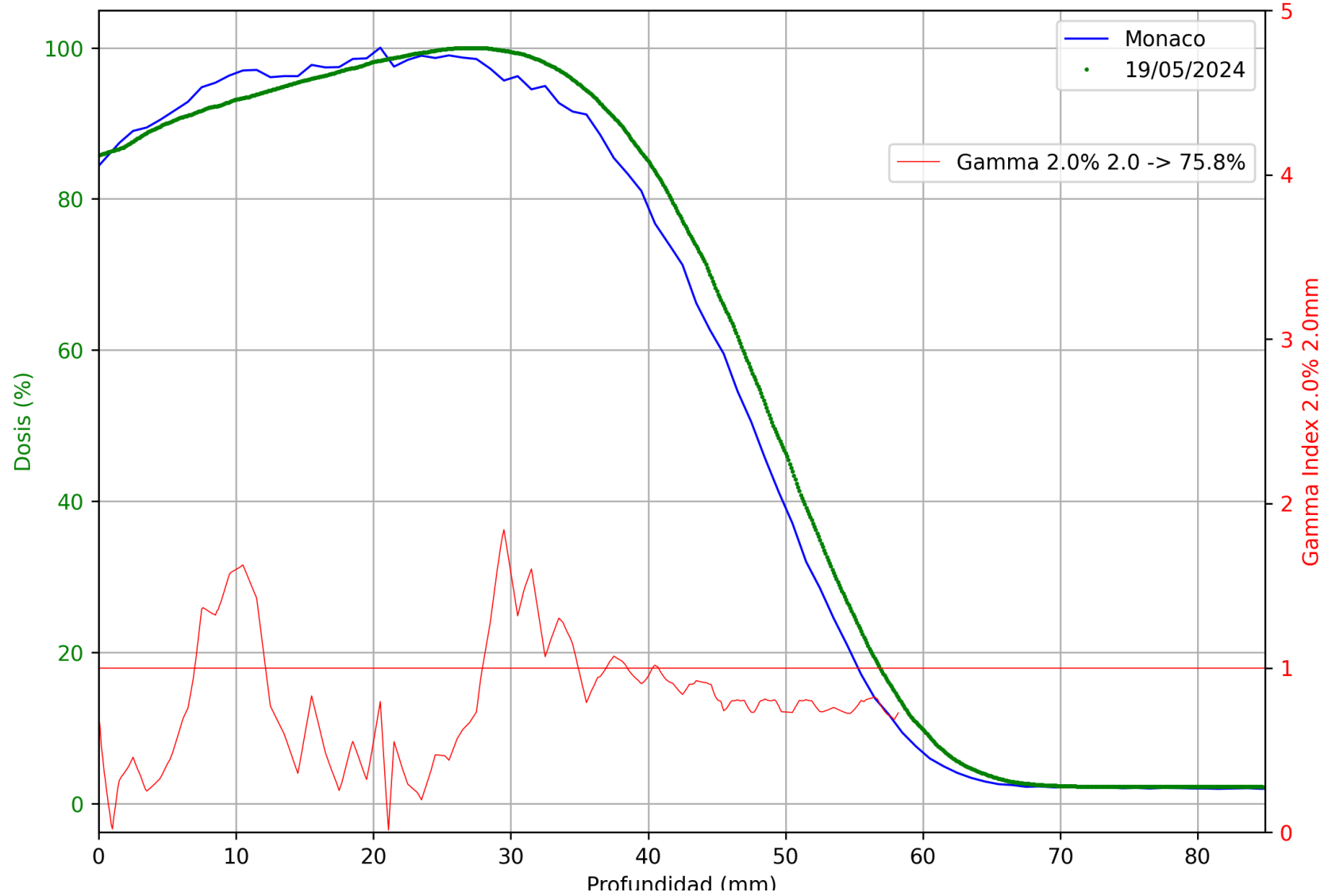


SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 15.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 20.0 cm2 - CC13SN14317

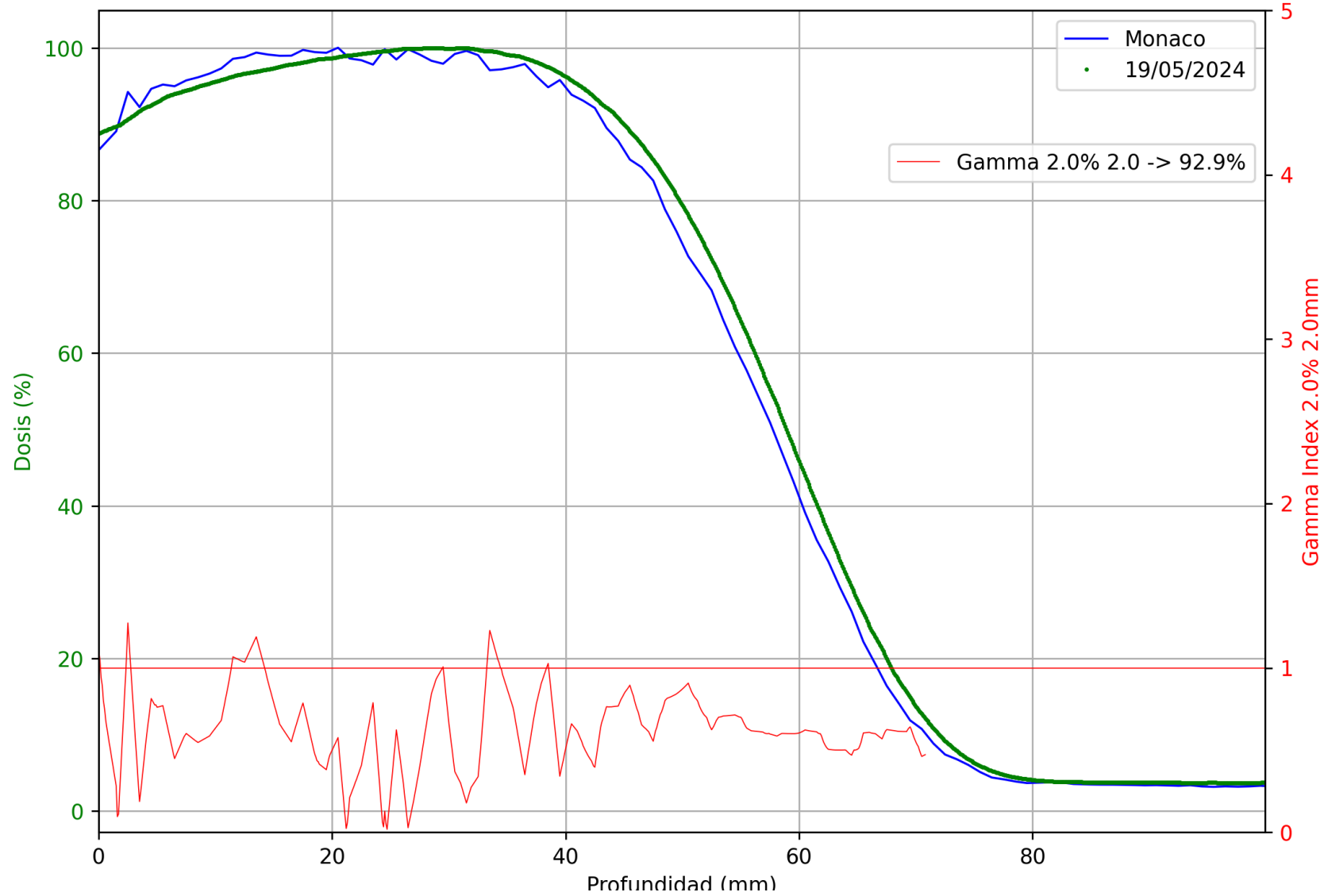


SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 6.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 6.0 cm2 - CC13SN14317

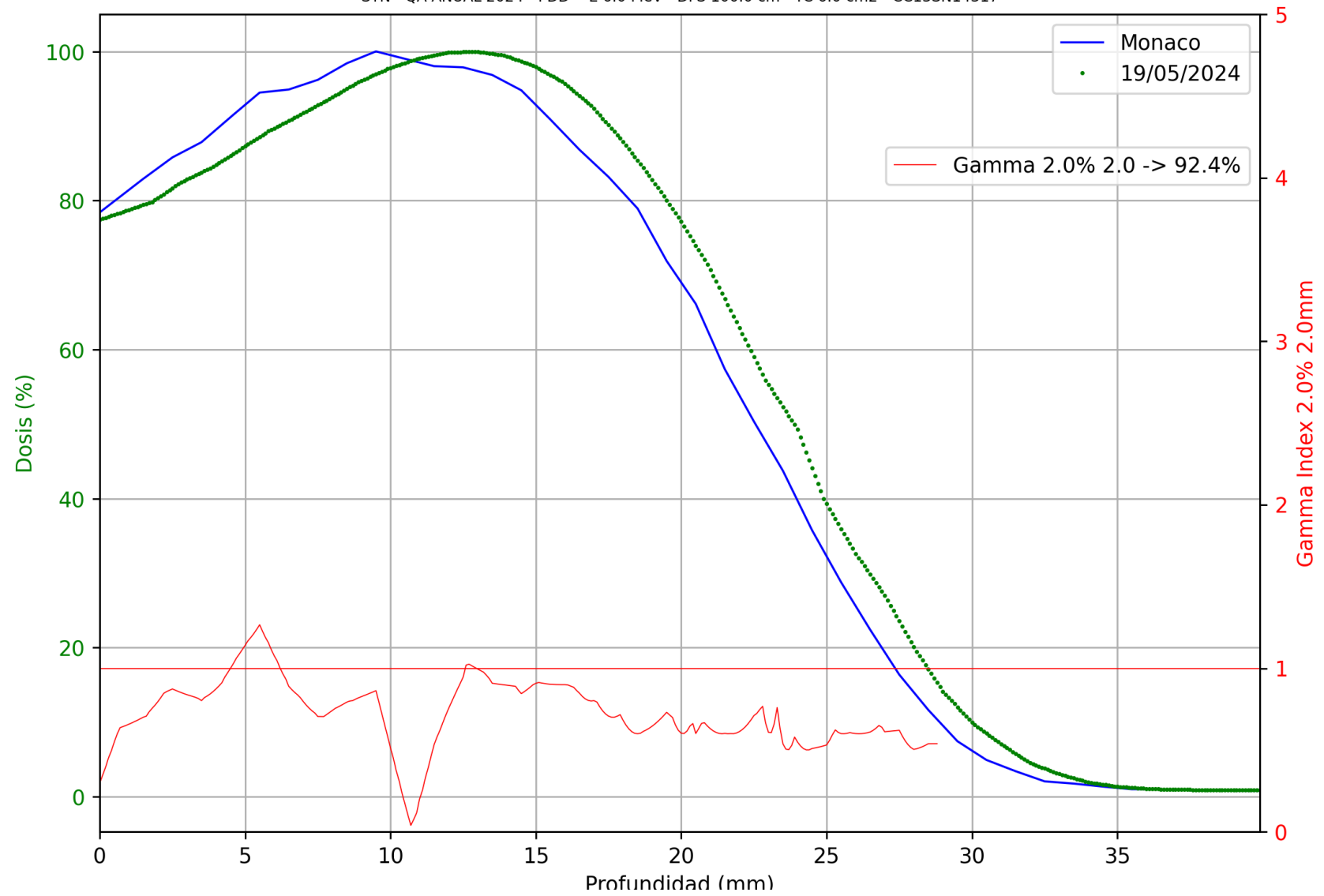

SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 9.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 6.0 cm2 - CC13SN14317

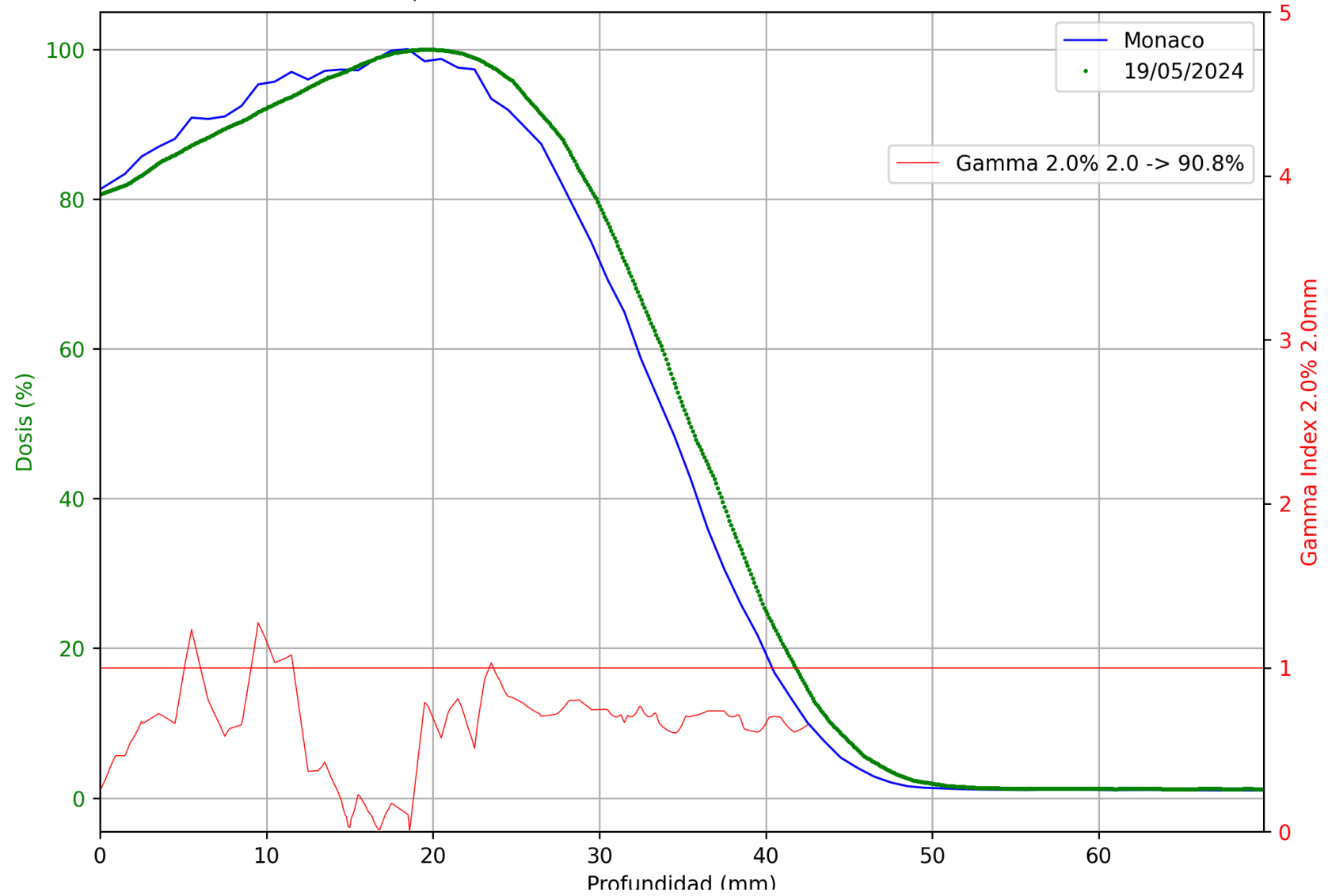

SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 12.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 6.0 cm2 - CC13SN14317

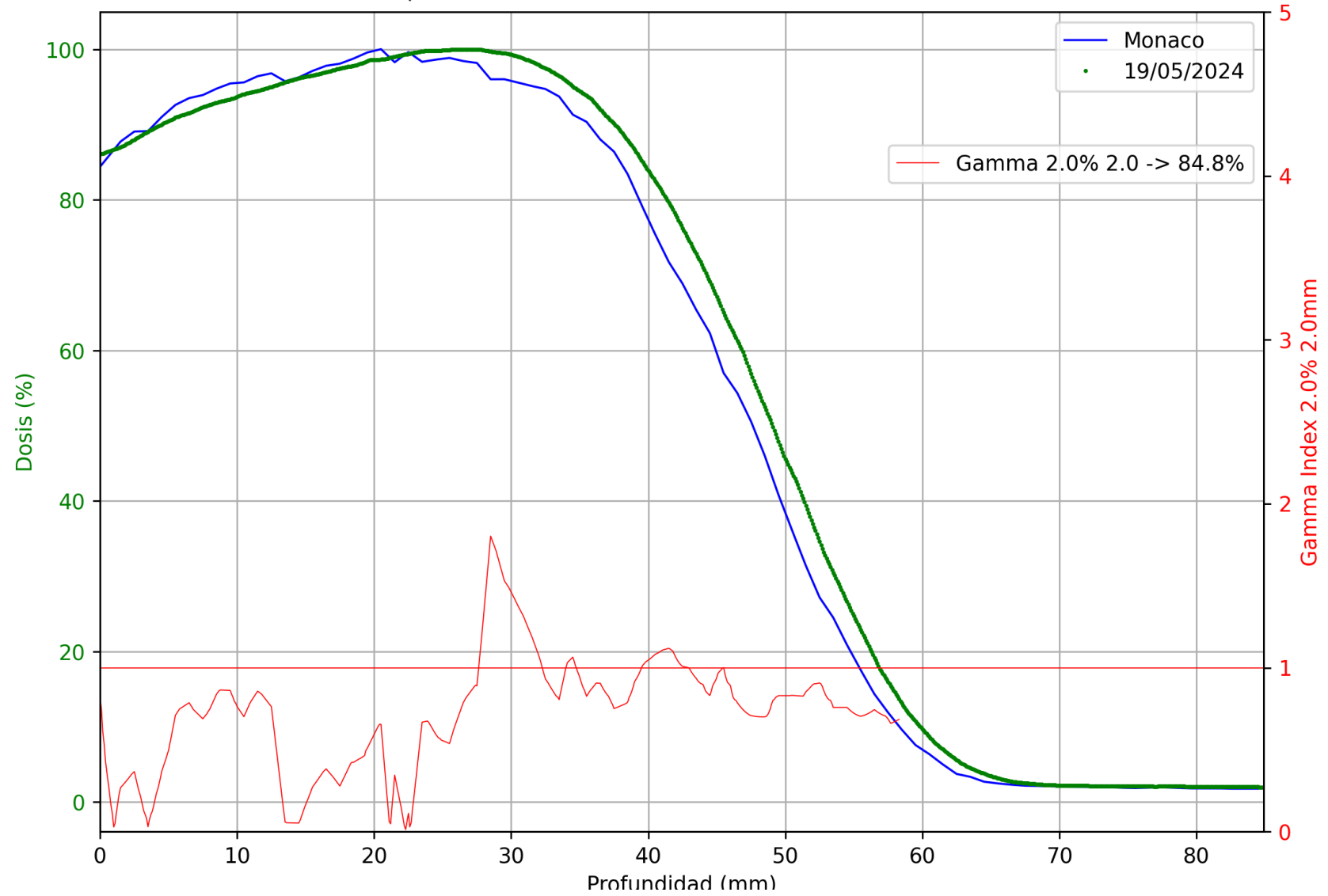



SYN - QA ANUAL 2024 - PDD - E 15.0 MeV - DFS 100.0 cm - TC 6.0 cm2 - CC13SN14317

